


Neotech ChinStrap™

ZUBEHÖR ZUR RESPIRATORISCHEN UNTERSTÜTZUNG

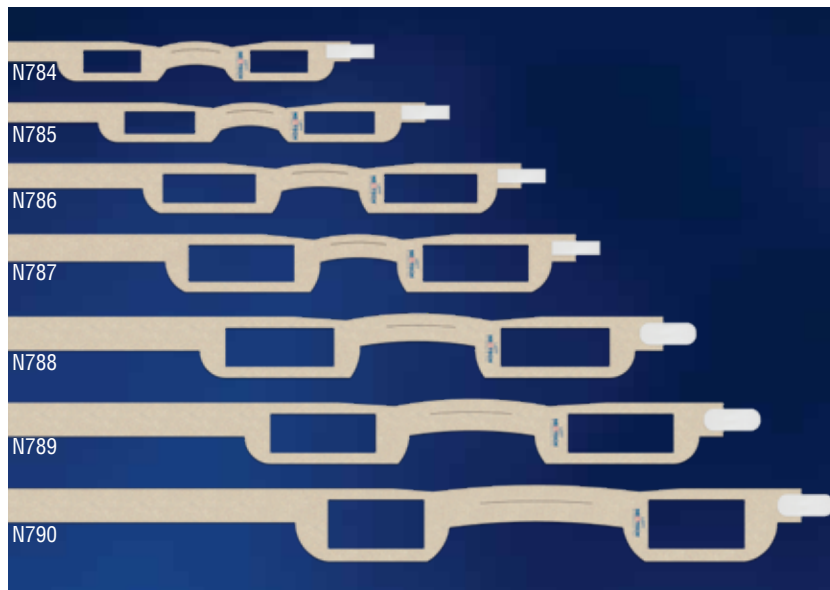

MERKMALE & VORTEILE

- Weiches, atmungsaktives, hautfreundliches NeoFoam® saugt Schweiß auf
- Flexibilität ermöglicht minimale Mundbewegung
- Ergonomisch geformt und einstellbar
- Geteiltes Design am Kinn für Komfort und Stabilität
- Ohröffnungen, um Umklappen zu verhindern
- Entwickelt, um das Risiko von Druckgeschwüren oder Nekrose zu reduzieren
- Einzigartiges Material verhindert Verschieben
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher hergestellt
- Einzeln verpackt

Katalog-Nr.	Artikel	Mengeinheit
N784	Nano	20/Kasten
N785	Mikro	20/Kasten
N786	Klein	20/Kasten
N787	Groß	20/Kasten
N788	X-Groß	20/Kasten
N789	Makro	20/Kasten
N790	Jumbo	20/Kasten

Patent #10,342,693



Neotech ChinStrap™

ZUBEHÖR ZUR RESPIRATORISCHEN UNTERSTÜTZUNG

GEBRAUCHSHINWEIS

Der Neotech ChinStrap ist dazu vorgesehen, den Mund des Patienten während der Beatmungstherapie geschlossen zu halten. Er ist für den Gebrauch an pädiatrischen Patienten (Neugeborene, Kleinkinder und Kinder) vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Die richtige Größe wählen durch Messung des Umfangs von der Mitte des Kinns, über das Ohr bis zum Hinterkopf.
- 2 Den Neotech ChinStrap so über das Kinn legen, dass die Vertiefung zum Hals zeigt und die glatte, weiße Seite auf der Haut liegt.
- 3 Das breitere, untere Teil des geteilten Kinnbands unter das Kinn legen und den oberen Teil über die Vorderseite des Kinns.
- 4 Das Band so in Richtung Hinterkopf ziehen, dass die Ohren in den Ohröffnungen sind und die Lasche vorsichtig am Band befestigen. Die mit „LINKS“ markierte Seite sollte sich unter dem linken Ohr des Patienten befinden.
Hinweis: Kann für optimale Passform zugeschnitten werden. Es sollte sichergestellt werden, dass das Band nicht zu fest sitzt oder auf die Ohren drückt. Die Lasche sollte das Band vollständig überlappen.
- 5 Alle 5 Tage oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll ersetzen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgebend ist.
Sofort ersetzen, wenn das Band abgenutzt oder sichtbar verschmutzt ist.



VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Der Neotech ChinStrap ist nicht für den Einsatz an Erwachsenen vorgesehen.
Nach Bundesgesetz darf dieser Artikel nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.
Bei Hautreizungen Gebrauch sofort unterbrechen.
Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.