


# Neotech ChinStrap™

## ACESSÓRIO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

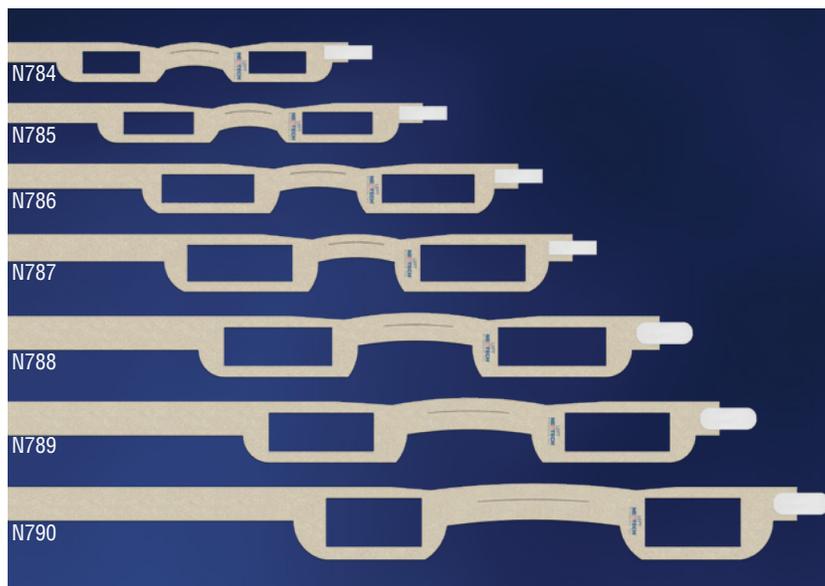

### — CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- NeoFoam® transpirável macio, respirável e adequado para a pele
- A flexibilidade permite movimentos mínimos da boca
- Adequado e ajustável
- Design com divisória de queixo para maior conforto e estabilidade
- Aberturas para as orelhas para evitar dobrar
- Criado para reduzir o risco de úlceras de pressão ou necrose
- O material exclusivo ajuda a prevenir o deslizamento
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Número	Item	Qtd/Unidade
N784	Nano	20/caixa
N785	Micro	20/caixa
N786	Pequena	20/caixa
N787	Grande	20/caixa
N788	Extra-grande	20/caixa
N789	Macro	20/caixa
N790	Jumbo	20/caixa

Patente dos EUA #10,342,693

# Neotech ChinStrap™

## ACESSÓRIO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA

### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Neotech ChinStrap foi concebido para manter a boca do paciente fechada durante o tratamento respiratório. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 Selecione o tamanho adequado, medindo a circunferência desde o centro do queixo, passando por por cima da orelha até à parte posterior da cabeça.



2 Posicione o Neotech ChinStrap no queixo com o recesso voltado para o pescoço e o lado liso e branco contra a pele.



3 Posicione a parte mais larga e baixa da tira do queixo sob o queixo e a parte superior na frente do queixo.

4 Puxe a alça em direção à parte posterior da cabeça com as orelhas posicionadas nas aberturas para as orelhas e, com cuidado, prenda a aba do gancho na alça. O lado marcado "LEFT" (ESQUERDA) deve estar posicionado sob a orelha esquerda do paciente.



*Nota: Pode ser cortado para um ajuste adequado. Certifique-se de que a tira não está muito apertada e que não pressiona as orelhas. A aba do gancho deve sobrepor a tira por completo.*

5 Substitua a cada 5 dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Substitua imediatamente se estiver visivelmente gasto ou sujo.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O Neotech ChinStrap não se destina a ser usados em adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilizar apenas num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2024 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M690 Rev B 2024.09.20

