


Sottogola Neotech ChinStrap™

ACCESSORI PER IL SUPPORTO ALLA RESPIRAZIONE

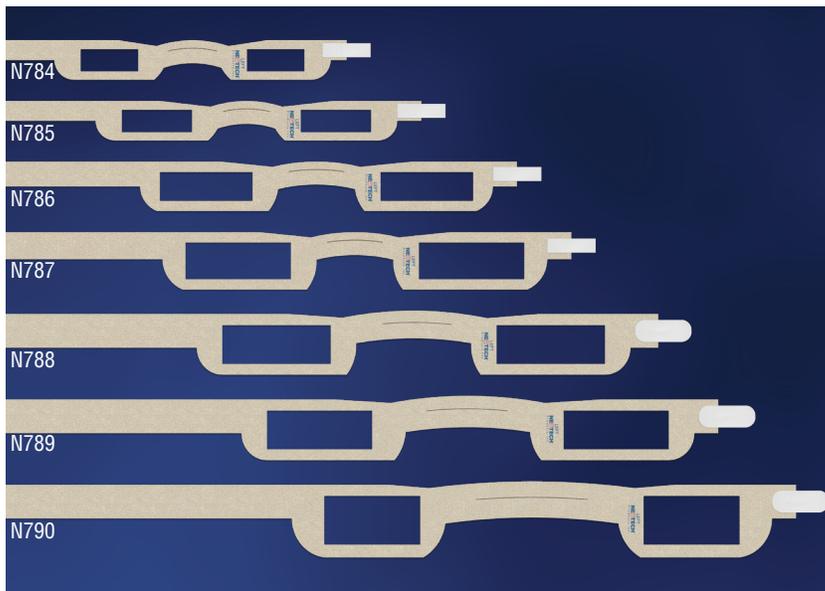

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- NeoFoam® è morbido, traspirante, rispetta la pelle e consente di regolare la sudorazione
- La sua flessibilità permette minimi movimenti della bocca
- Adattabile e regolabile
- Design con fenditura per il mento per garantire comfort e stabilità
- Le aperture per le orecchie prevengono le pieghe
- Progettato per ridurre il rischio di necrosi e ulcere da pressione
- Lo straordinario materiale contribuisce a evitare lo scivolamento
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante
- Confezionato singolarmente

Cat #	Elemento	Qtà/Unità
N784	Nana	20/scatola
N785	Micro	20/scatola
N786	Piccola	20/scatola
N787	Larga	20/scatola
N788	X-Larga	20/scatola
N789	Macro	20/scatola
N790	Jumbo	20/scatola

Brevetto USA #10,342,693

Sottogola Neotech ChinStrap™

ACCESSORI PER IL SUPPORTO ALLA RESPIRAZIONE

INDICAZIONI D'USO

La Neotech ChinStrap è utile a mantenere chiusa la bocca del paziente durante la terapia respiratoria. Inoltre, il suo uso è rivolto a pazienti pediatrici quali neonati, infanti, bambini e adolescenti ma comunque anche a pazienti adulti.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Selezionare la taglia adatta misurando la circonferenza a partire dal centro del mento, passando sopra le orecchie, fino a dietro la testa.
- 2 Posizionare Neotech ChinStrap sul mento con il rientro rivolto verso il collo e la parte bianca e liscia a contatto con la pelle.
- 3 Posizionare la parte più bassa e più ampia del sottogola sotto il mento e quella più alta sulla parte anteriore del mento.
- 4 Tendere il sottogola verso la parte posteriore della testa posizionando le orecchie nelle aperture apposite e fissare delicatamente la linguetta del gancio al prodotto. Il lato contrassegnato da "LEFT" deve essere posizionato sotto l'orecchio sinistro del paziente.
- 5 Sostituire il prodotto ogni 5 giorni o secondo le indicazioni dell'ospedale, preferendo l'opzione che preveda una maggior frequenza.

Nota: può essere tagliato su misura. Assicurarsi che il sottogola non sia troppo stretto e che non faccia pressione sulle orecchie. La linguetta del gancio deve sovrapporsi completamente al sottogola.

Se Neotech ChinStrap è usurato o visibilmente sporco, sostituirlo immediatamente.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere immediatamente l'uso.

Esclusivamente per uso monopaziente.

