


NeoBridge[®]

DRŽÁK UMBILIKÁLNÍHO KATETRU

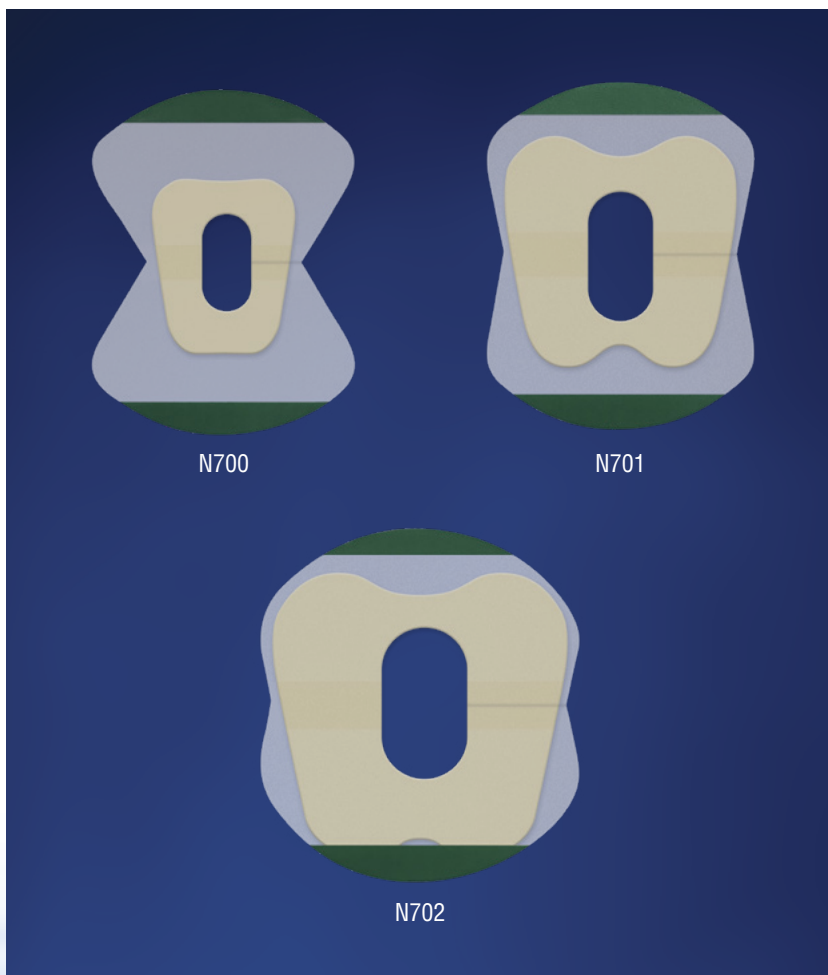

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Materiál NeoBond[®] šetrný k pokožce na hydrokoloidní bázi
- Zajišťuje umístění chlopní navržených pro uvolnění napětí na hadičkách a pro předcházení dislokace
- Pojme dva katetry
- Chlopeň provedená tak, aby šla opakovaně přilepovat a odlepovat
- Průhledná chlopeň pro lepší viditelnost
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog	Velikost	Cca. hmotnost	Množství/jednota
N700	Micro	800 or less	20/krabice
N701	Malý	800-1200 gm	20/krabice
N702	Velký	1200-2200 gm	20/krabice

U.S. Patent #5,370,627



NeoBridge®

DRŽÁK UMBILIKÁLNÍHO KATETRU

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Držák NeoBridge je určen pro ukotvení a podporu umbilikálních katetrů. Je určen pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

Po zavedení katetru pokožku očistěte a osušte podle zavedených postupů nemocnice.

Poznámka: Je důležité, aby kůže byla co možná nejčistší a maximálně vysušená. Držák NeoBridge správně nepřilne na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka mají také negativní vliv na přilnutí.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

Použití

- 1 Před odstraněním plastové fólie se musí hydrokoloidní náplast aktivně zahřát. Techniky zahřívání zahrnují: podržení mezi dlaněmi po dobu minimálně 60 sekund, podržení v blízkosti sálavého ohříváče po dobu 10-15 sekund nebo podržení proti chemickému ohříváči nohou po dobu 10-15 sekund.
- 2 Vyhodte bílý ochranný papírek a potom z hydrokoloidní báze sloupněte a vyhodte průhlednou plastovou ochrannou fólii.
- 3 Katétr zasuněte skrze střední část držáku NeoBridge tak, aby byl otvor na pravé straně a širší strana s hydrokoloidní bází směřovala k hlavě pacienta.
- 4 Aplikujte bázi na kůži a po dobu 60 sekund ji podržte na místě, abyste zajistili správnou přilnavost.
- 5 Neprůhlednou krycí vrstvu odloupněte z horní poloviny chlopně. Chlopeň zvedněte a přilepte katétr(y) k chlopni do oblouku nebo ve tvaru písmene U, aby se minimalizovalo napětí s katétre(m) (katétr(y)), které vycházejí po straně chlopně.

Poznámka: Zajistěte, aby katétr(y) nepřesahoval(y) do zelené oblasti chlopně. Pokud používáte dva katétr(y), nechte každý s nich vycházet po jedné se stran chlopně.

- 6 Neprůhlednou krycí vrstvu odloupněte z dolní poloviny chlopně. Chlopeň zvedněte a zarovnejte zelenou oblast dolní poloviny se zelenou oblastí horní poloviny chlopně a pevně přimáčkněte, přičemž katétr(y) bude (budou) obklopeny lepivými chlopněmi.
- 7 Podle potřeby odlepte chlopně od sebe a katetr (katetry) vyjměte nebo přemístěte, potom je zase přilepte k sobě a zajistěte.

Odstranění

- 1 Držák NeoBridge vyměňujte každých 5 dní nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.
- 2 Odlepte chlopně od sebe a katetr (katetry) vyjměte.
- 3 Nasákněte držák NeoBridge vodou nebo fyziologickým roztokem..
- 4 NeoBridge pomalu sloupněte z pokožky, za stálého otírání pokožky vodou nebo solným roztokem.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Držák NeoBridge by měl být použit jen tehdy, když je pacient pod stálým a přímým dohledem proškolených zdravotníků.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Držák NeoBridge správně nepřilne na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka mají negativní vliv na přilnutí.

Pro čištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Pouze pro jednoho pacienta.

