


Neotech ChinStrap™

ACCESORIO DE APOYO RESPIRATORIO

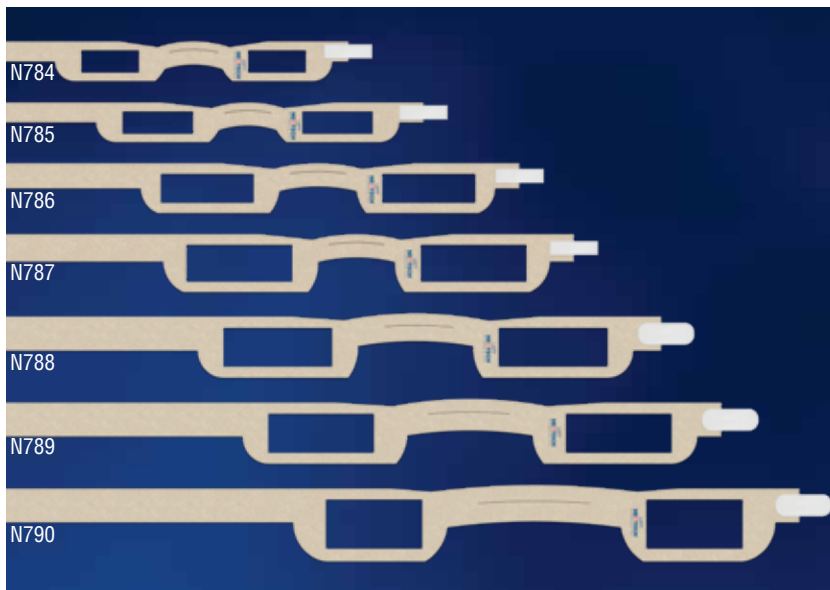

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El NeoFoam® es suave, transpirable y cómodo para la piel, absorbiendo el sudor
- Su flexibilidad permite un movimiento mínimo de la boca
- Adaptable y ajustable
- Diseño partido en la barbilla para comodidad y estabilidad
- Aberturas para los oídos, para evitar que se doblen por encima
- Diseñado para reducir el riesgo de úlceras de presión o necrosis
- Su material singular ayuda a evitar el deslizamiento
- No hecho con látex de goma natural ni DEHP plastificador
- Empaquetado individualmente

Número	Tamaño	Cant./Unidad
N784	Nano	20/Caja
N785	Micro	20/Caja
N786	Pequeña	20/Caja
N787	Grande	20/Caja
N788	extragrande	20/Caja
N789	Macro	20/Caja
N790	Jumbo	20/Caja

Patente #10,342,693



Hecho en EEUU

Neotech ChinStrap™

ACCESORIO DE APOYO RESPIRATORIO

INDICACIONES DE USO

La ChinStrap de Neotech está diseñada para mantener cerrada la boca del paciente durante el tratamiento respiratorio. Está diseñada para su uso con pacientes pediátricos (neonatos, lactantes y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Seleccione el tamaño adecuado midiendo desde el centro de la barbilla, a lo largo de la oreja, pasando por la coronilla de la cabeza, a lo largo de la otra oreja y de regreso al centro de la barbilla.

N784 Nano: se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 22 y 27 cm

N785 Micro: se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 28 y 35 cm

N786 Pequeño: se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 33 y 42 cm

N787 Grande: se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 36 y 46 cm

N788 Extragrande: se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 38 y 53 cm

N789 Macro: se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 39 y 58 cm

N790 Jumbo: se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 40 y 66 cm

- 2 Coloque la Neotech ChinStrap en la barbilla con la parte más delgada en la parte frontal de la barbilla y la parte más ancha debajo de la barbilla.

Nota: Solo el lado blanco de la correa debe tener contacto la piel.



- 3 Tire suavemente de la correa hacia la coronilla posterior de la cabeza con las orejas colocadas dentro de las aberturas para las orejas y luego sujete la lengüeta de gancho a la correa. El lado marcado como "LEFT" debe estar debajo de la oreja izquierda del paciente.

Nota: Se puede recortar para un ajuste adecuado. Asegúrese de que la correa no esté demasiado apretada ni presione las orejas. La lengüeta de gancho debe superponerse completamente a la correa.

- 4 Sustituya la ChinStrap cada 5 días o cuando lo indique el protocolo hospitalario, lo que ocurra antes.

Sustituya de inmediato si está desgastada o se ve sucia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La Neotech ChinStrap no han sido creadas para uso en adultos.

La legislación federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o cuando lo ordene un médico.

La Neotech ChinStrap solo debe utilizarse mientras el paciente esté bajo la supervisión continua y directa de profesionales de la salud. La ChinStrap puede representar un posible peligro de estrangulación.

Deje de usarlo inmediatamente si se produce irritación de la piel.

Para uso en un solo paciente.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](https://www.neotechproducts.com)

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

