


## NeoPulse™

### FASCETTA MONOUSO PER PULSOSSIMETRO

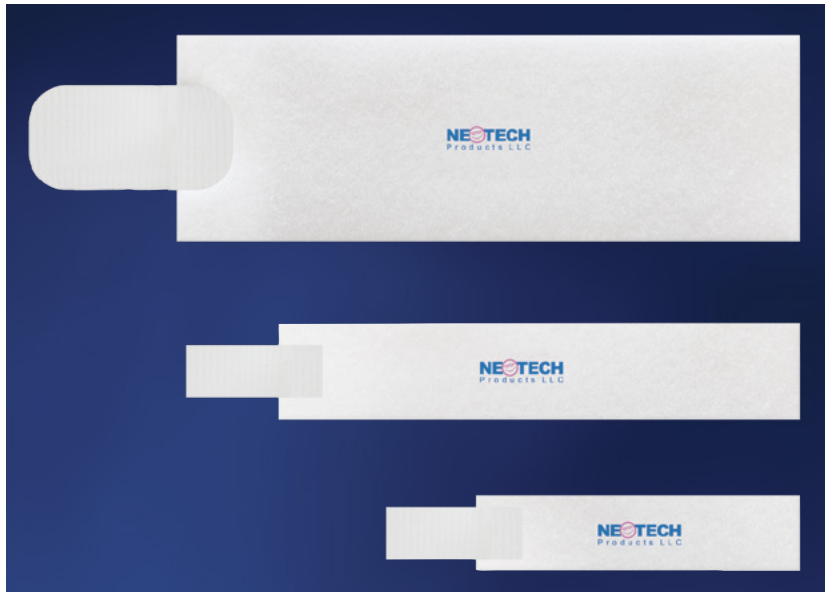

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Morbida, NeoFoam® traspirante non irritante
- Leggera, aderente e regolabile
- Progettata per garantire comfort e stabilità
- Non contiene lattice di gomma naturale o plastificante DEHP
- In confezione singola

Cat. #	Misurare	Dimensione	Qtà/Unità
N781	Piccola	3/4" x 3"	100/scatola
N782	Larga	1" x 5"	100/scatola
N783	X-Large	2" x 6"	100/scatola

# NeoPulse™

## FASCETTA MONOUSO PER PULSOSSIMETRO

### INDICAZIONI D'USO

NeoPulse è destinato all'uso per il fissaggio in posizione di sensori di pulsossimetri. È destinato all'uso su pazienti pediatrici (neonati, infanti e bambini).

### ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Posizionare il sensore del pulsossimetro in base al protocollo ospedaliero.
- 2 Avvolgere NeoPulse attorno al piede e al sensore del pulsossimetro e fissare delicatamente la linguetta con gancio.

*Nota: può essere accorciato per un'aderenza ottimale. Verificare che la fascetta non sia troppo stretta. La linguetta con gancio deve avvolgere completamente la fascetta.*

- 3 Dopo l'applicazione verificare che la circolazione del piede sia ottimale.
- 4 Sostituire NeoPulse ogni 5 giorni o in base al protocollo ospedaliero, a seconda dell'intervallo più breve. Sostituire immediatamente in presenza di usura o sporcizia visibili.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

Esclusivamente per uso monopaziente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Fabbricato  
Negli USA

M696 Rev A