


# Neotech Bridge<sup>®</sup>

## DISPOSITIVO DE AYUDA A LA LACTANCIA

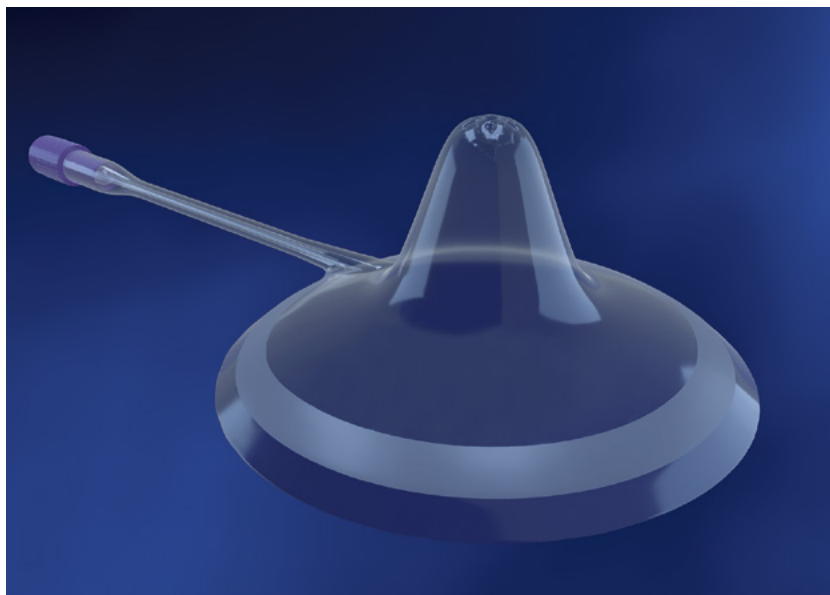

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Permite la administración de suplementos durante la lactancia, lo que ayuda a estimular la producción natural de leche
- Evita las interrupciones de la lactancia que pueden conducir a problemas de enganche y producción
- Se puede usar para proporcionar calostro, leche materna extraída, leche materna fortificada o fórmula cuando sea necesario
- La válvula unidireccional evita el reflujo y ayuda a maximizar la producción natural de leche.
- Permite un control preciso del flujo, la velocidad y el momento de administración del suplemento
- Proporciona superficie para que el bebé se enganche
- Ayuda a mantener el contacto de piel a piel
- Silicona delgada de grado médico para una sensación más natural
- No contiene látex de caucho natural ni plastificante DEHP

Cat No.	Artículo	Cant/Unidad
N8001-5	Bridge	5/caja
N8001-30	Bridge	30/caja
N8001-KT*	Equipo	1/caja

\*Incluye Bridge, extensión, jeringa de 20 ml y jeringa de 60 ml.

**N8001-KT no está disponible para la venta en todos los países.  
Por favor contacte su distribuidor Neotech para más información.**

Patente

#12,083,07, #D967,433; #D914,892; Pendiente Adicional

# Neotech Bridge®

## DISPOSITIVO DE AYUDA A LA LACTANCIA

### INDICACIONES DE USO

El Neotech Bridge es un dispositivo de ayuda a la lactancia diseñado para ofrecer nutrición suplementaria a un lactante alimentado por el pecho.

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Llene la jeringa (se vende por separado para N8001-5 y N8001-30) con leche o fórmula y enrósquela en el conector púrpura del Neotech Bridge.
- 2 Invierta el Bridge y colóquelo en el centro, sobre el pezón. Doble el Bridge hacia abajo sobre el pecho para fijarlo.
- 3 Enganche al bebé al Bridge.
- 4 Presione la jeringa para suministrar la leche necesaria.
- 5 Limpie después de cada uso y desinfecte diariamente, según las instrucciones. Sustituya el Bridge después de una semana o 20 lavados, lo que ocurra antes.

### Limpieza

Limpie inmediatamente después de cada uso.

- 1 Separe y enjuague todas las piezas, incluido el émbolo de la jeringa, con agua del grifo para eliminar los residuos de leche.
- 2 Sumerja todas las piezas por separado en agua tibia con jabón durante 5 minutos.
- 3 Vuelva a introducir el émbolo en la jeringa y llénela de agua tibia con jabón. Conecte al Bridge y al tubo de extensión (si se utiliza; no se incluye para N8001-5 y N8001-30). Enjuague y repita varias veces.
- 4 Llene la jeringa con agua limpia y vuelva a conectarla al Bridge y al tubo de extensión (si se ha utilizado). Enjuague y repita varias veces.
- 5 Llene la jeringa con aire y vuelva a conectarla al Bridge y al tubo de extensión (si se ha utilizado). Haga pasar aire por el tubo varias veces para extraer las gotas de agua.
- 6 Desconecte todas las piezas, incluido el émbolo de la jeringa, colóquelas sobre una superficie limpia y seca y déjelas secar al aire. Guarde las piezas secas en una bolsa/recipiente de plástico cuando no las utilice.

*Precaución: No seque las piezas con papel de cocina o un producto similar, ya que esto reducirá la vida útil del aparato. No guarde las piezas mojadas o húmedas.*

### Desinfección

Desinfecte una vez al día. No utilice esterilizadores ni microondas.

- 1 Separe y enjuague todas las piezas, incluido el émbolo de la jeringa, con agua del grifo para eliminar los residuos de leche.
- 2 Llene una cacerola con 8 tazas de agua potable y déjela hervir.
- 3 Apague la fuente de calor y deje enfriar el agua hirviendo durante un mínimo de dos minutos y medio.
- 4 Introduzca las piezas por separado en el agua y déjelas en remojo durante 10 minutos.
- 5 Deje que el agua se enfríe en la cacerola abierta y extraiga las piezas del agua cuidadosamente con ayuda de unas pinzas.
- 6 Coloque las piezas sobre una superficie limpia y seca y déjelas secar al aire. Guarde las piezas secas en una bolsa/recipiente de plástico cuando no las utilice.

*Precaución: No seque las piezas con papel de cocina o un producto similar, ya que esto reducirá la vida útil del aparato. No guarde las piezas mojadas o húmedas.*

### CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El Bridge no se debe utilizar si existe una contraindicación médica para la lactancia. Si no está segura, consulte a su médico.

No deje que el contenido del suplemento se seque en la jeringa antes de lavarla.

Separe y lave todas las piezas que entren en contacto con el pecho, la leche materna o el suplemento inmediatamente después de su uso para evitar que los restos de leche se sequen y prevenir la proliferación de bacterias.

Para la limpieza, solo utilice agua potable del grifo o embotellada.

No friegue las piezas de la jeringa.

No exponer al calor extremo.

No seque los componentes con papel de cocina o productos similares. No guarde las piezas mojadas o húmedas.

Siga las instrucciones de limpieza proporcionadas por Neotech Products.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355